

STANDARD M10

La plateforme polyvalente de Point-of-Care MDx

Ce produit est utilisé avec le système SD BIOSENSOR – STANDARD M10.



STANDARD **M10**

STI Panel

Détection simultanée de CT, NG, MG, TV, UU, MH, HSV1, HSV2



IVDR

Test moléculaire STI-Panel-Point-of-Care

- La première cartouche **POC-PCR** commercialisée pour les huit principaux agents pathogènes d'IST
- Détection simultanée de CT, NG, MG, TV, UU, MH, HSV1, HSV2
- Type d'échantillon: urines

All-in-one Cartridge Sample-in Result-out

- Real-Time PCR
- **Extraction de NA + amplification**
- Test multiplex jusqu'à **12-plex**
- Contrôle interne inclus
- Les réactifs lyophilisés garantissent la stabilité
- Conservation à température ambiante

Une plateforme de diagnostic moléculaire polyvalente pour le Point-of-Care

- Prend peu de place
- Random Access
- Configuration évolutive
- Une minute de préparation des échantillons
- Test d'une durée de **de 64 minutes**

SPÉCIFICATIONS


Numéro d'article	11STI10A			
Méthode	All-in-one Cartridge Extraction d'ADN bactérien/viral/parasitaire: Méthode des piliers Amplification de l'acide nucléique: Real-Time PCR			
Type d'échantillon	Urine, 1 ml			
Durée de test	64 minutes			
Température de stockage	2 à 28 °C			
Limite de détection	CT - 3,8 UI/ml NG - 1,3 CFU/ml	MG - 0,02 bactéries/ml TV - 6 trophozoïtes/ml	UU - 0,5 CCU/ml HH - 0,06 CFU/ml	HSV1 - 7 TCID50/ml HSV2 - 148 PFU/ml
Détection de	<i>Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis</i> <i>Virus de l'herpès simplex 1 et 2</i> Contrôle interne (CI)			
Test/Kit	10 tests/kits			



STANDARD™ M10 STI Panel

La première POC-PCR pour la détection des huit principaux agents pathogènes d'IST

Plus d'un million d'infections sexuellement transmissibles (IST) sont contractées chaque jour dans le monde. Sans traitement, elles peuvent avoir des conséquences:

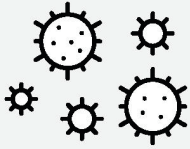

✓ Risque accru de propagation et de contamination



✓ Douleurs pelviennes/abdominales persistantes



✓ Incapacité à concevoir ou complications pendant la grossesse

Détection simultanée de:



- CT
- NG
- MG
- TV
- UU
- MH
- HSV1
- HSV2

PROCÉDURE DE TEST

1 Scanner l'ID de l'échantillon **2 Scanner la cartouche**



3 Transfert d'échantillons



4 Charger la cartouche



INFORMATION DE COMMANDE

STANDARD M10 POC-PCR

Numéro d'article	Produit	Contenu
11M1011	Console STANDARD M10	1 console M10 (module de fonctionnement)
11M1012	Module STANDARD M10	1 module M10 (module d'analyse)

Cartouche

Numéro d'article	Produit	Agent pathogène
11STI10A	STANDARD M10 STI Panel	CT, NG, MG, TV, UU, MH, HSV1, HSV2