

## Information

*always your partner*



# TECO<sup>®</sup> Fast Cryptococcus neoformans Antigen LFA


Zur frühen Diagnose von Cryptococcus-Infektionen wie z. B. Cryptococcus-Meningitis, und als Monitoring-Tool im Therapieverlauf

- Lateral Flow Assays auf Fluoreszenzbasis zur Auslesung am Reader
- Quantitative Bestimmung des Cryptococcus-Antigens Glycuroxylomannan (GXM) in ng/ml in nur 20 Minuten
- Detektiert die jeweiligen Serotypen von A, B, C, D und AD
- Klinisch validiert für CSF und Serumproben
- Keine Probenbehandlung erforderlich
- Nachweisgrenze: 0.1 ng/ml, klinischer Cut-off Wert: 0.5 ng/ml

	Serum (n = 310)	CSF (n = 350)
<b>Klinische Sensitivität</b>	97 %	100 %
<b>Klinische Spezifität</b>	98.1 %	100 %



## TECO® *Fast Cryptococcus neoformans* Antigen LFA Ablauf

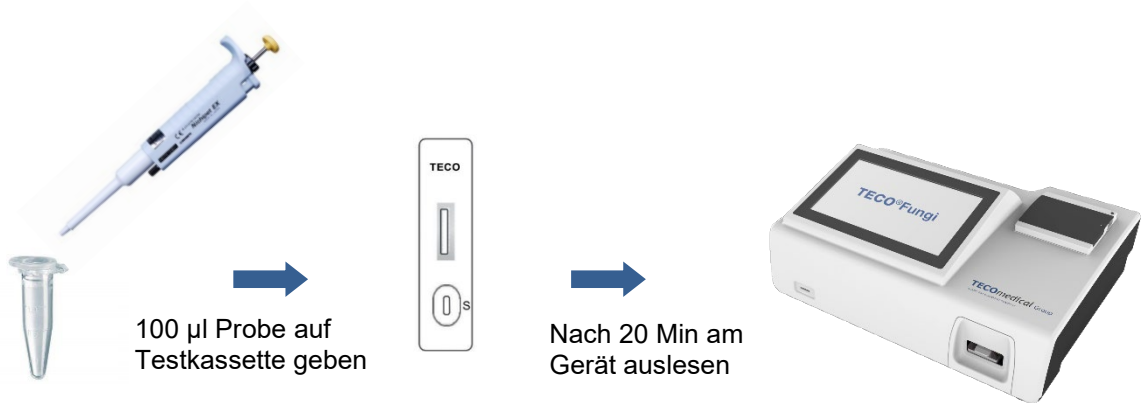

TECO® *Fast Cryptococcus neoformans* Antigen LFA  
Katalognummer: TE1085

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:  
For further information please contact:  
Pour plus d'information, veuillez contacter:

[www.tecomedical.com](http://www.tecomedical.com)



A EUROBIO SCIENTIFIC COMPANY

Switzerland / Headquarters

**TECOmedical AG**

Gewerbestrasse 10

4450 Sissach

Phone +41 61 985 81 00

Fax +41 61 985 81 09

Mail [info@tecomedical.com](mailto:info@tecomedical.com)

Germany

**TECOmedical GmbH**

Wasserbreite 57

32257 Bünde

Phone +49 52 23 985 99 99

Fax +49 52 23 985 99 98

Mail [info@tecomedical.com](mailto:info@tecomedical.com)

Austria

**TECOmedical AG**

Phone 0800 20 40 66

Fax 0800 20 40 55

Mail [info@tecomedical.com](mailto:info@tecomedical.com)