

Information

always your partner

Real Accurate Quadruplex FLU/COVID-19 RT-PCR




RT-PCR zur extraktionsfreien Bestimmung von Influenza und SARS-CoV-2

- Nachweis von Influenza A, Influenza B und SARS-CoV-2
 - Validiertes, einfaches Behandlungsprotokoll zur thermalen Probenaufbereitung
 - Zeit- und kosteneffizient
 - Unabhängig von der Verfügbarkeit von Extraktionsmaterial
 - Entlastung von Extraktionssystemen
- CE zertifizierte IVD Methode (RT-PCR plus thermale Probenbehandlung)

Testprinzip	Nachweis viraler RNA für Influenza A, Influenza B und SARS-CoV-2 in klinischen Proben
Technologie	Real-time RT-PCR
Probenmaterial	Nasopharyngeale Abstriche (Tupfer)
Kontrollmaterial	Positive und negative Kontrolle, Interne Kontrolle
Validiert auf	LC480®, Rotor-Gene® Q, Quantstudio 5®, CFX96®, Mic®, MyGoPro ESR®
LoD (µl/Reaktion/Thermale Behandlung)	Flu A (H3N2) : 5.5 ; Flu A (H1N1 pdm09) :14.5 ; Flu B : 28.0; SARS-CoV-2 : 5.5.
Spezifität	Keine Kreuzreaktionen zu 34 relevanten Pathogenen
Thermale Behandlung	10 Minuten bei 99°Celsius, Zentrifugation, 5µl in PCR-Mix
Validierte Medien	E-Swab Medium , VTM und 0.9% (w/v) NaCl
Beschreibung	RealAccurate Quadruples Flu/COVID-19 PCR Kit
Produziert von	PathoFinder B.V., Maastricht, Niederlande
Packungsgrösse	50 reactions
Artikelnummer	PF0976-R

Probenbehandlung unter Verwendung des thermalen Protokolls

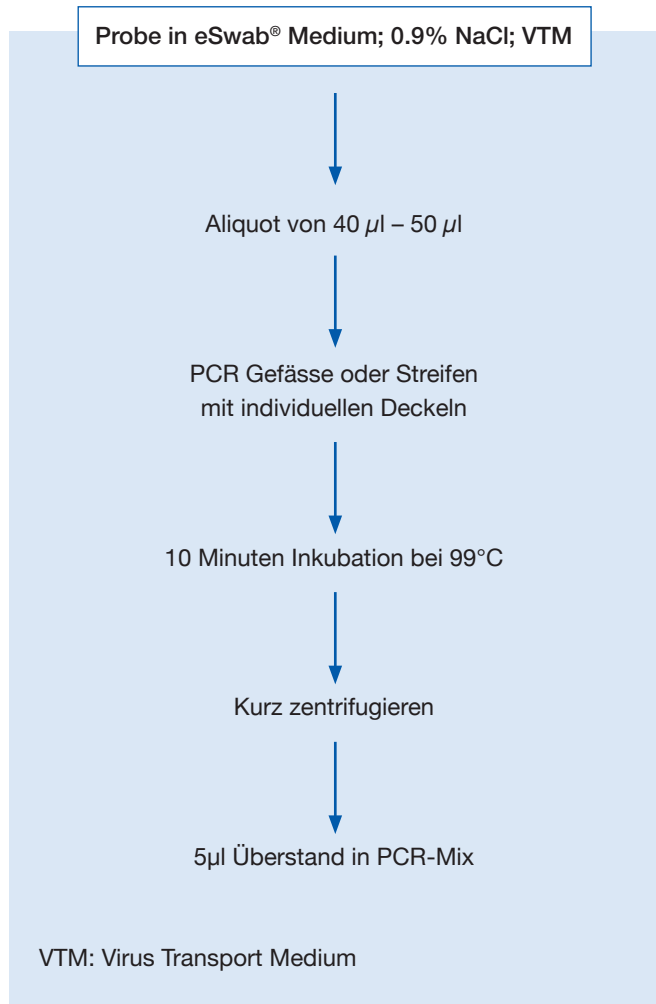

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
For further information please contact:
Pour plus d'information, veuillez contacter:

www.tecomedical.com



A EUROBIO SCIENTIFIC COMPANY

Switzerland / Headquarters

TECOmedical AG

Gewerbstrasse 10

4450 Sissach

Phone +41 61 985 81 00

Fax +41 61 985 81 09

Mail info@tecomedical.com

Germany

TECOmedical GmbH

Wasserbreite 57

32257 Bünde

Phone +49 52 23 985 99 99

Fax +49 52 23 985 99 98

Mail info@tecomedical.com

Benelux

TECOmedical Benelux BV

Computerweg 22

3542 DR Utrecht, The Netherlands

Phone +31 30 307 87 30

Fax +31 30 307 49 39

Mail benelux@tecomedical.com

Austria

TECOmedical AG

Phone 0800 20 40 66

Fax 0800 20 40 55

Mail info@tecomedical.com